




INSERISCI LA
TUA GRAFICA


Fustella

Margine di abbondanza

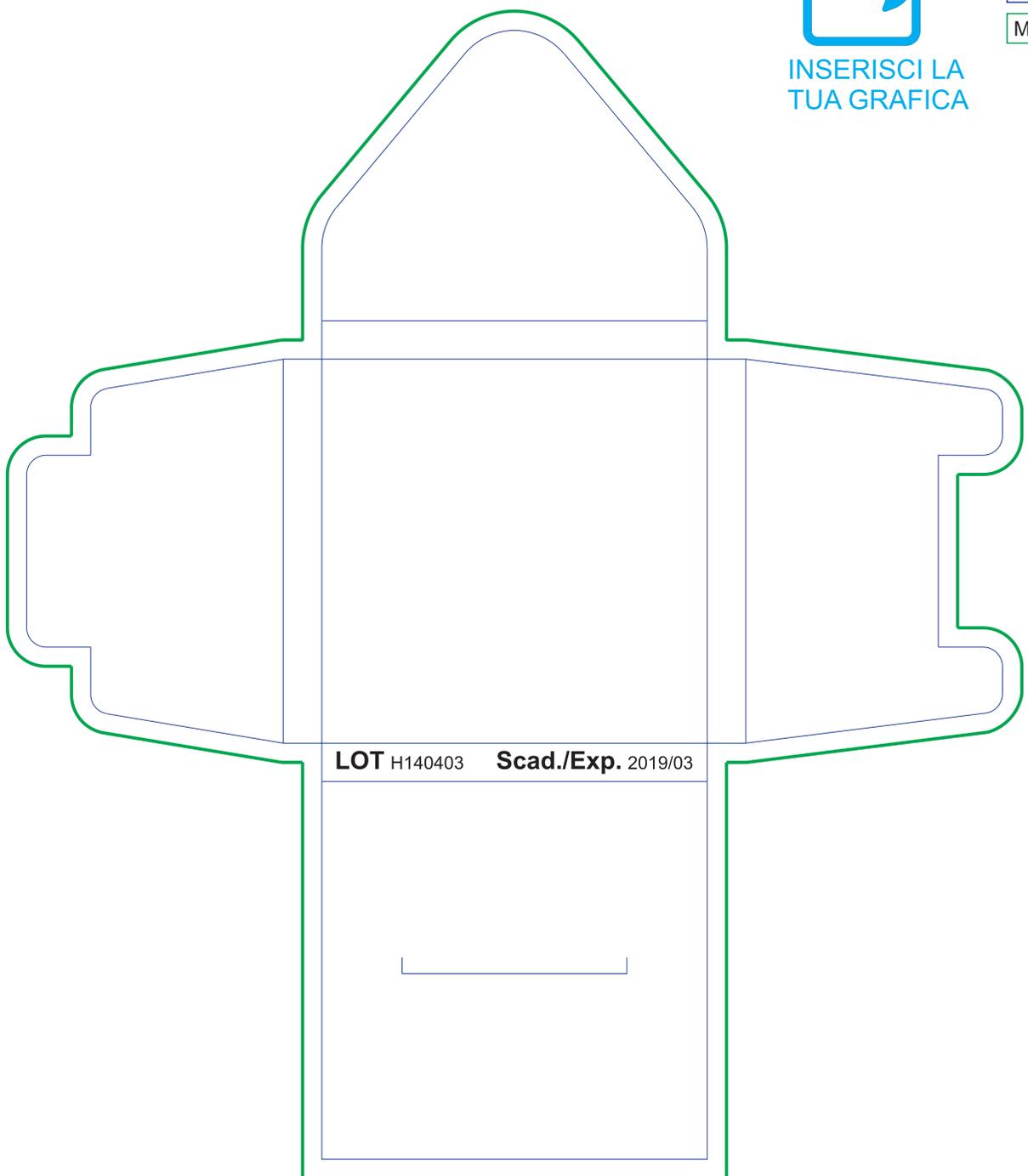

LOT H140403 Scad./Exp. 2019/03

ESTERNO

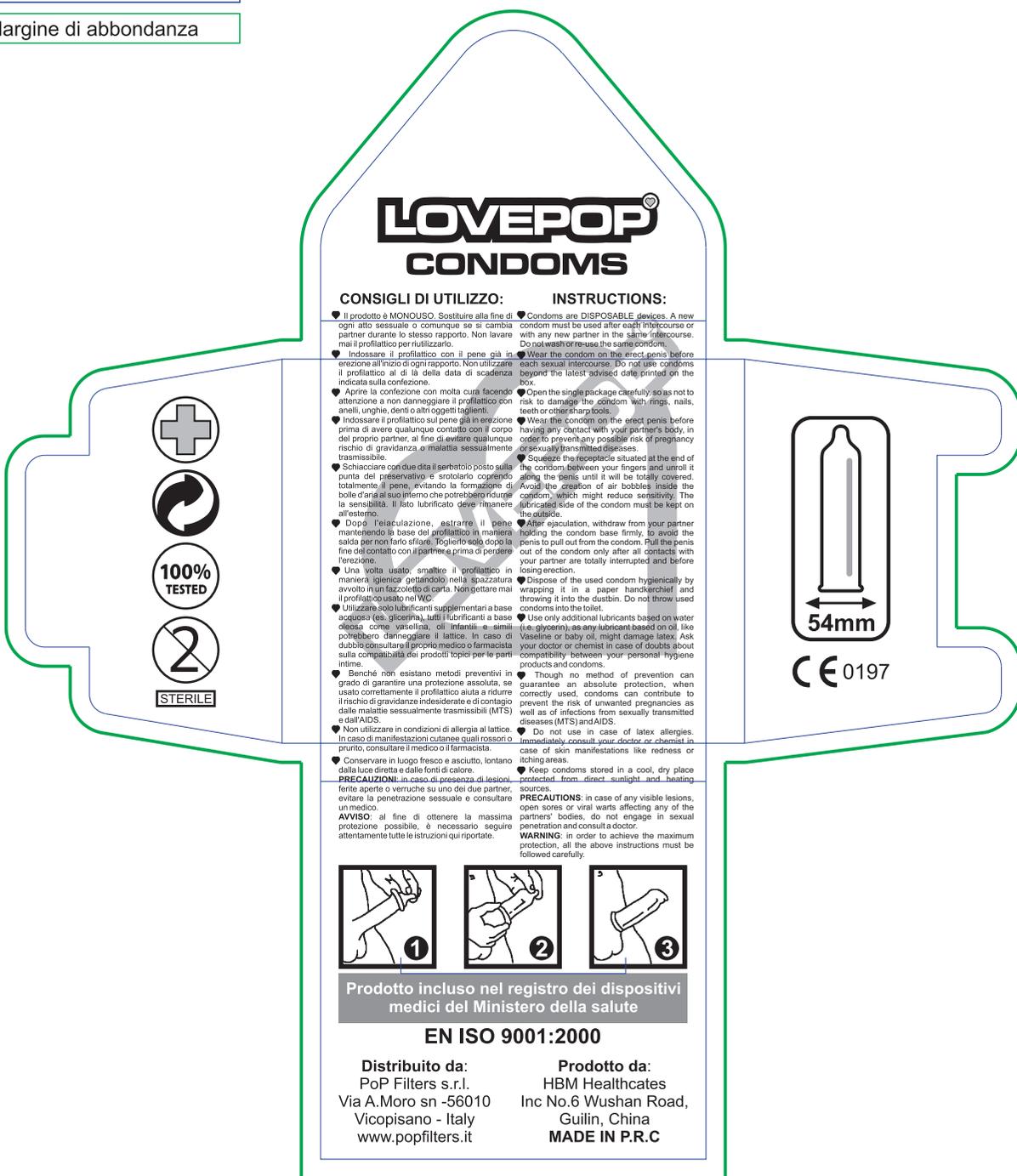


LOVEPOP
CONDOMS

CONSIGLI DI UTILIZZO:

- Il prodotto è MONOUSO. Sostituire alla fine di ogni atto sessuale o comunque se si cambia partner durante lo stesso rapporto. Non lavare mai il profilattico per riutilizzarlo.
- Indossare il profilattico con il pene già in erezione all'inizio di ogni rapporto. Non utilizzare il profilattico al di là della data di scadenza indicata sulla confezione.
- Aprire la confezione con molta cura facendo attenzione a non danneggiare il profilattico con anelli, unghie, denti o altri oggetti taglienti.
- Indossare il profilattico sul pene già in erezione prima di avere qualunque contatto con il corpo del proprio partner, al fine di evitare qualunque rischio di gravidanza o malattia sessualmente trasmissibile.
- Schiacciare con due dita il gettatoio posto sulla punta del preservativo e srotolarlo coprendo totalmente il pene, evitando la formazione di bolle d'aria al suo interno che potrebbero ridurre la sensibilità. Il lato lubrificato deve rimanere all'esterno.
- Dopo l'eiaculazione, estrarre il pene mantenendo la base del profilattico in maniera salda per non farlo sfilare. Toglietelo solo dopo la fine del contatto con il partner e prima di perdere l'erezione.
- Una volta usato, smaltire il profilattico in maniera igienica gettandolo nella spazzatura avvolto in un fazzoletto di carta. Non gettare mai il profilattico usato nel WC.
- Utilizzare solo lubrificanti supplementari a base acquosa (es. glicefina), tutti i lubrificanti a base oleosa (es. vasellina, olii infantili) e simili potrebbero danneggiare il lattice. In caso di dubbio consultare il proprio medico o farmacista sulla compatibilità dei prodotti topici per le parti intime.
- Benché non esistano metodi preventivi in grado di garantire una protezione assoluta, se usato correttamente il profilattico aiuta a ridurre il rischio di gravidanze indesiderate e di contagio dalle malattie sessualmente trasmissibili (MTS) e dall'AIDS.
- Non utilizzare in condizioni di allergia al lattice. In caso di manifestazioni cutanee quali rossori o prurito, consultare il medico o il farmacista.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta e dalle fonti di calore.

INSTRUCTIONS:

- Condoms are DISPOSABLE devices. A new condom must be used after each intercourse or with any new partner in the same intercourse. Do not wash or re-use the same condom.
- Wear the condom on the erect penis before each sexual intercourse. Do not use condoms beyond the latest advised date printed on the box.
- Open the single package carefully so as not to risk to damage the condom with rings, nails, teeth or other sharp objects.
- Wear the condom on the erect penis before having any contact with your partner's body, in order to prevent any possible risk of pregnancy or sexually transmitted diseases.
- Squeeze the receptacle situated at the end of the condom between your fingers and unroll it along the penis until it will be totally covered. Avoid the creation of air bubbles inside the condom, which might reduce sensitivity. The lubricated side of the condom must be kept on the outside.
- After ejaculation, withdraw from your partner holding the condom base firmly, to avoid the penis to pull out from the condom. Pull the penis out of the condom only after all contacts with your partner are totally interrupted and before losing erection.
- Dispose of the used condom hygienically by wrapping it in a paper handkerchief and throwing it into the dustbin. Do not throw used condoms into the toilet.
- Use only additional lubricants based on water (e.g. glycerin), as any lubricant based on oil, like Vaseline or baby oil, might damage latex. Ask your doctor or chemist in case of doubts about compatibility between your personal hygiene products and condoms.
- Though no method of prevention can guarantee an absolute protection, when correctly used, condoms can contribute to prevent the risk of unwanted pregnancies as well as of infections from sexually transmitted diseases (MTS) and AIDS.
- Do not use in case of latex allergies. Immediately consult your doctor or chemist in case of skin manifestations like redness or itching areas.
- Keep condoms stored in a cool, dry place protected from direct sunlight and heating sources.

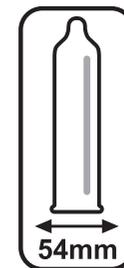

CE 0197



Prodotto incluso nel registro dei dispositivi medici del Ministero della salute

EN ISO 9001:2000

Distribuito da:
PoP Filters s.r.l.
Via A.Moro sn -56010
Vicopisano - Italy
www.popfilters.it

Prodotto da:
HBM Healthcates
Inc No.6 Wushan Road,
Guilin, China
MADE IN P.R.C

INTERNO NON MODIFICABILE

FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetto da password).

I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero)
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite
in automatico con un profilo di separazione standard.

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.